CEINTURE DE TRACTION
SCOLIOEASE

“ Se libérer d’une vie de douleurs dues à la scoliose. ”

Dr Kevin Lau
Scoliosis & Spine Correction Clinic
302 Orchard Road #10-02A
Tong Building (Rolex Centre),
Singapore 238862.
Email: support@hiyh.info



PRENEZ VOTRE
SANTE EN MAIN

Pour en savoir plus sur le compagnon
DVD d’exercices, livre audio et application ScolioTrack pour une
visite sur iPhone :

www.HIYH.info

CEINTURE DE TRACTION
SCOLIOEASE

“ Se libérer d’une vie de douleurs dues à la scoliose. ”

Nous sommes ravis de présenter les dernières technologies pour le traitement des douleurs lombaires provoquées par des maladies ou des blessures de la colonne vertébrale. La ceinture de traction ScolioEase est équipée d’un système unique d’expansion de poche d’air qui réduit considérablement la pression sur les vertèbres et qui est extrêmement efficace pour soulager la douleur et le traitement. La ceinture de traction ScolioEase est une conception totalement nouvelle qui se révèle extrêmement avantageuse dans les cas pré et postopératoires et offre une plus grande flexibilité.



Manuel de l’utilisateur

Que contient la boîte ?



Ceinture de traction ScolioEase



Manuel de l'utilisateur



Pompe à inflation

Qu'est-ce que la ceinture de traction ScolioEase ?

En tant que dispositif breveté, la ceinture de traction ScolioEase permet de soulever doucement le torse de l'utilisateur au moyen de colonnes d'air verticales. La ceinture de traction ScolioEase est légère, fine et extrêmement facile à utiliser. Elle contribue à la stabilisation du dos et à l'amélioration de la mobilité, tout en aidant à soulager la douleur et à prévenir les blessures. Elle peut être facilement portée sous les vêtements de l'utilisateur et permet à ce dernier d'effectuer des tâches quotidiennes telles que conduire, marcher et rester debout pendant de longues périodes. L'utilisation de la ceinture de traction ScolioEase simplifie la vie active liée à la mobilité, qui comprend des activités telles que le sport et les loisirs.

Le fonctionnement de la ceinture de traction ScolioEase est illustré par le port de celle-ci entre la partie inférieure de la cage thoracique et le haut de la hanche (crête iliaque). La ceinture produit un effet de traction qui se traduit par une réduction de la pression dans la région lombaire. Les colonnes d'air extensibles verticalement créent un "Body Jack" virtuel qui assure la décompression de la colonne vertébrale. Il en résulte l'élimination de la douleur inférieure et rayonnante due à la compression des nerfs.

La ceinture de traction ScolioEase supprime les effets de la compression gravitationnelle et aide à la rééducation active. Cela conduit à une réduction "naturelle" de la douleur car l'espace entre les vertèbres est agrandi, ce qui permet au disque intervertébral de revenir à sa position naturelle.







www.HIYH.info Ceinture de traction ScolioEase 3

Suggestions pour la ceinture ScolioEase

Nous la conseillons à toutes les personnes qui souffrent de douleurs aiguës ou chroniques dans les vertèbres lombaires en raison d'une entorse. De même, elle est extrêmement utile pour les personnes souffrant d'une hernie discale intervertébrale. La scoliose, la sténose rachidienne et la spondylolyse sont d'autres formes de souffrance que ce dispositif permet de bien traiter. Pour tous les patients qui vont être opérés à cause d'une hernie discale ou ceux qui ont déjà subi cette opération peuvent également faire bon usage de ce dispositif. Les femmes qui ont vécu une grossesse ou un accouchement et qui souffrent de douleurs dorsales après l'accouchement peuvent profiter de l'appareil et se faciliter la vie pendant leur allaitement.

De même, les étudiants et les employés de bureau qui doivent rester assis pendant de longues heures à leur bureau d'étude ou de travail dans de mauvaises postures et ceux qui ne disposent pas de chaises ergonomiques peuvent utiliser ce dispositif pour se soulager de leurs douleurs dorsales. Les personnes dont les muscles du tronc sont faibles, entraînant une augmentation des douleurs dorsales, sont idéalement placées pour utiliser ce dispositif, car il soulagerait la douleur et améliorerait les muscles du tronc.

Les professions qui impliquent l'utilisation des muscles du tronc, comme celles qui nécessitent de soulever des charges lourdes et de travailler manuellement. Ces personnes trouveraient cet appareil extrêmement utile pour se débarrasser de la douleur tout en protégeant le dos contre d'autres blessures pendant le travail. Il en va de même pour les sportifs, car leur dos est souvent soumis à un stress important lors de leurs séances d'entraînement ou d'événements sportifs, lorsqu'ils exercent le maximum de contraintes et de charges sur la colonne vertébrale. En bref, le mode de vie de toute personne, souffrante ou non d'une scoliose, bénéficierait d'un dispositif comme la ceinture ScolioEase pour traiter les douleurs lombaires et les problèmes liés aux nerfs.

Extrêmement confortable à utiliser

La convivialité est un autre avantage dont bénéficient les patients qui utilisent la ceinture ScolioEase. Elle peut être portée pendant différentes durées et à différentes forces en fonction de la pression que vous appliquez. Cela permet d'adapter la Scoliobelt aux besoins individuels de la personne aussi bien qu'à la situation ou aux activités qu'elle va faire.

Elle est portable et ne requiert aucune ressource comme l'électricité et ne demande pas l'utilisation de drogues, etc. Contrairement aux médicaments, elle n'a pas de date de péremption. Il s'agit d'un investissement unique et il n'y a pas de coûts récurrents.

Une fois portée, elle est suffisamment pratique pour que l'utilisateur puisse vaquer à ses activités quotidiennes normales et peut même faire des exercices légers. Elle peut facilement se cacher sous les vêtements sans être visible de l'extérieur. Il n'y a pas d'effets secondaires, de séquelles ou de complications signalées en ce qui concerne son effet sur la colonne vertébrale. La ceinture de traction ScolioEase est si facile à utiliser qu'il n'est pas nécessaire d'apprendre aux patients à s'administrer des autotraitements à domicile.

Les traitements sont ainsi plus pratiques et les patients ont le sentiment de mieux maîtriser leur vie. Des études cliniques ont prouvé que la ceinture de traction ScolioEase peut accroître l'amplitude de vos mouvements, réduire vos douleurs dorsales et empêcher la dégénérescence de la colonne vertébrale. J'ai personnellement constaté d'excellents résultats chez mes patients et j'utilise souvent la ceinture de traction ScolioEase en conjonction avec des changements de régime alimentaire et de l'exercice.

www.HIYH.info

Comment fonctionne la ceinture ScolioEase ?



Placez la ceinture non gonflée entre la côte inférieure et l'os de la hanche. Veillez à ce que la ceinture soit serrée et bien ajustée autour de la taille.



Gonflez entièrement la ceinture à l'aide de la pompe fournie, la ceinture sera étendue verticalement de 13 cm à 21 cm. Cela produira un effet de traction sur la zone vertébrale appliquée.

Gonflez entièrement la ceinture à l'aide de la pompe fournie, la ceinture sera étendue verticalement de 13 cm à 21 cm. Cela produira un effet de traction sur la zone vertébrale appliquée.

Avant le traitement :


Les hernies discales ou les disques bombés entraînent des douleurs dans la colonne vertébrale en exerçant une pression sur les racines nerveuses.



Disque normal contre hernie discale

Après le traitement :


En utilisant la ceinture de traction ScolioEase comme "Body Jack", la dilatation de la colonne d'air entraîne l'augmentation de l'espace intervertébral, provoquant ainsi une réduction de la gravité ainsi que de la pression dans la région lombaire.

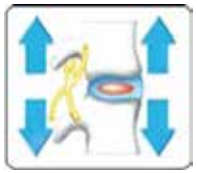



Particularités de la ceinture de traction ScolioEase

1. Diminution des effets de la gravité et des charges de compression pour la relaxation des spasmes musculaires, des crampes, des foulures et des douleurs associées à la scoliose.
2. Contribue au soulagement des douleurs causées par la scoliose, les maladies dégénératives des disques/articulations, la sciatique, la spondylose et la sténose rachidienne.
3. La traction du disque intervertébral entraîne une réduction de la douleur dans le dos, les hanches, les cuisses, les jambes et les pieds, provoquée principalement par la scoliose, les disques bombés et les hernies discales.
4. Elle aide les personnes qui doivent soulever des poids lourds et celles qui doivent conduire ou rester assises pendant de longues heures, car elle réduit la charge de compression sur la scoliose.
5. Aide au maintien d'une posture correcte permettant une répartition uniforme du poids sur toute la colonne vertébrale de la scoliose lombaire.
6. Peut être portée par les utilisateurs sous leurs vêtements.
7. Confortable à porter et légère, elle permet de bouger en toute sécurité lorsqu'elle est portée.
8. Fabriqué dans un matériau 100% coton doux et durable.

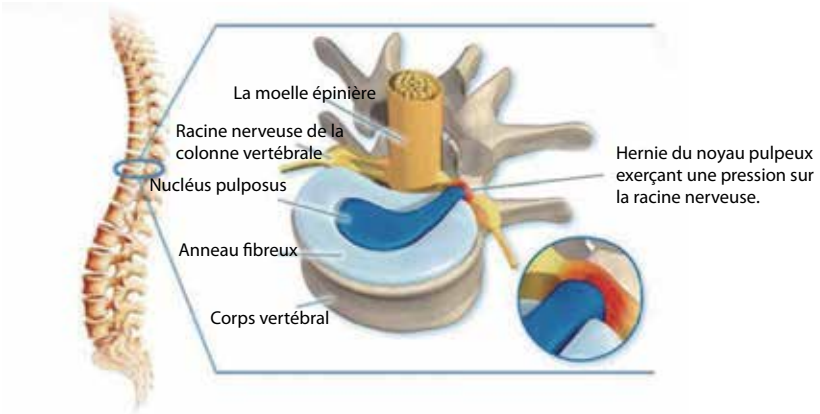

www.HIYH.info Ceinture de traction ScolioEase 7

Comment porter



Important

Note : Ne pas porter la ceinture de traction ScolioEase pendant les repas ou pendant au moins 1 heure après les repas. Choisissez une taille appropriée, ce qui peut être fait en mesurant autour de l'abdomen/la région ombilicale pour déterminer avec précision la taille de la ceinture.

1. Mesurez la circonférence abdominale pour déterminer la taille (voir tableau page 13).





2. Tenez la ceinture de traction ScolioEase derrière le torse et enroulez-la autour de la région abdominale. Lorsque les deux extrémités se rapprochent dans la région de l'estomac, croisez les extrémités avec les extrémités de la valve sur le dessus. Veillez à ce que le velcro soit aussi serré que possible. Voir l'image 2. Il est important que la ceinture soit bien ajustée, sûre et confortable.





3. Avant de gonfler la ceinture, vérifiez que la valve est bien serrée dans le sens des aiguilles d'une montre. La pompe prévue à cet effet est munie d'un clip qui se fixe aisément sur la valve en serrant la pince (voir illustration 4).





4. Utilisez la pompe fournie avec le système de ceinture de traction ScolioEase et gonflez lentement. Les colonnes d'air se dilateront progressivement et l'utilisateur commencera à ressentir une "action de levage".

5. Retirez la pince qui connecte la pompe à air une fois que la levée recherchée du "Body Jack" de la ceinture de traction ScolioEase a été atteinte.





6. A porter pendant 2 à 3 heures, 3 fois par jour ou selon les recommandations de votre médecin.

www.HIYH.info

Avertissement

1. La ceinture de traction ScolioEase ne peut pas être utilisée par les patients atteints de tumeurs, les femmes enceintes ou les enfants de moins de 12 ans.
2. Les personnes souffrant de blessures graves, de dommages à la colonne vertébrale, d'ostéoporose, ayant subi récemment un traumatisme médullaire ou souffrant d'autres maladies aiguës ou chroniques ne doivent PAS UTILISER la ceinture de traction ScolioEase sans consulter leur médecin au préalable.



Précautions à prendre

1. Évitez tout contact ou toute égratignure avec des objets tranchants.
2. Servez-vous de la ceinture de traction ScolioEase uniquement sur la zone lombaire.
3. Évitez de vous exposer à la chaleur directe ou à la lumière du soleil.
4. Ne portez PAS la ceinture lorsque vous mangez ou une heure après un repas.
5. Il est important d'inclure des exercices pour le dos dans votre programme de réadaptation active afin de lutter contre l'atrophie due à la désuétude et de favoriser le renforcement de la colonne vertébrale.
6. En cas de douleur, il faut cesser immédiatement d'utiliser la ceinture et consulter un médecin.
7. Lisez attentivement le manuel avant d'utiliser la ceinture de traction ScolioEase.
8. Utilisez un chiffon légèrement humide pour le nettoyage de la courroie. Séchez avec une serviette. Ne pas faire sécher en plein soleil.

www.HIYH.info

www.HIYH.info

Recommandations pour les douleurs lombaires

1. Les meilleurs résultats sont obtenus en position debout
2. Porter en continu pendant 2 à 3 heures, puis enlever pendant au moins 2 heures et répéter la même chose plusieurs fois par jour.
3. La ceinture ScolioEase peut être portée pour prévenir les douleurs dorsales lors de l'exécution de tâches normales qui sollicitent le bas du dos.
4. La chaleur peut promouvoir la relaxation musculaire avant l'utilisation de la ceinture de traction ScolioEase. Toutefois, la glace est utile en cas d'inflammation aiguë. Consultez votre médecin si la glace ou la chaleur est indiquée avant de l'utiliser.
5. Le positionnement de la ceinture de traction ScolioEase est important entre les deux points d'ancrage (la cage thoracique et la crête pelvienne) pour obtenir une traction maximale. La ceinture peut toutefois être réglée plus ou moins haute en fonction de votre morphologie.
6. Un t-shirt en coton fin peut être porté sous la ceinture de traction ScolioEase pour un meilleur confort au cas où le contact direct de la ceinture avec la peau est indésirable. Si les signes d'allergie persistent, consultez votre médecin.


Les usages recommandés pour la scoliose

Pour les patients présentant une courbe inférieure à 20 degrés, souffrant de douleurs ou d'autres problèmes et ayant tendance à progresser, comme les adolescents, il est recommandé de traiter votre scoliose avec la ceinture de traction ScolioEase pendant 1/2 heure, 1 ou 2 fois par jour, jusqu'à la disparition de la douleur.

Chez les patients présentant une courbure supérieure à 20 degrés, lorsque la scoliose est progressive, il est recommandé de procéder à des traitements quotidiens de 1 heure, 1 ou 2 fois par jour, jusqu'à la disparition de la douleur. Cela peut bien sûr varier en fonction de l'âge et de la constitution de chaque patient.

Chez les patients dont la courbure est supérieure à 40 degrés ou qui souffrent de douleurs, le traitement ScolioEase commence immédiatement pour une durée maximale de 2 heures, 2 ou 3 fois par jour.

Rappelez-vous cependant que si la ceinture de traction ScolioEase s'est avérée bénéfique, il est préférable de commencer lentement, comme pour tout autre exercice, tout en renforçant progressivement votre élan pour des exercices plus vigoureux plus tard. Si vous vous lancez à fond dans un exercice à fort impact, votre corps sera plus douloureux que détendu. Résistez donc à la tentation de vous lancer à fond dans un programme d'exercices que vous avez éventuellement choisi vous-même.

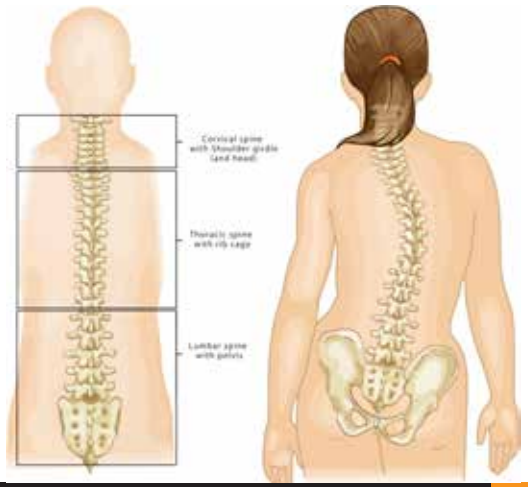




Les aspects uniques de la ceinture de traction ScolioEase

1. Les gens ont désormais la possibilité de se déplacer en toute sécurité, de porter et d'utiliser facilement leurs vêtements, et de profiter d'une traction très efficace à la maison, au travail ou dans leurs loisirs.
2. La posture et le soutien en position debout sont améliorés. La ceinture de traction ScolioEase diminue la pression et la douleur.
3. Légère et pratique, elle atténue la douleur au travail, en voyage ou durant l'exercice.
4. La prévention, l'entretien et le bien-être à tout moment et en tout lieu.

Choisissez la bonne taille de ceinture adaptée à votre tour de taille :


DIMENSION	MESURE DE LA TAILLE	
(S) Petit	28″ - 36″	70cm - 90cm
(M) Moyen	36″ - 40″	90cm - 100cm
(L) Grand	40″ - 47″	100cm - 120cm

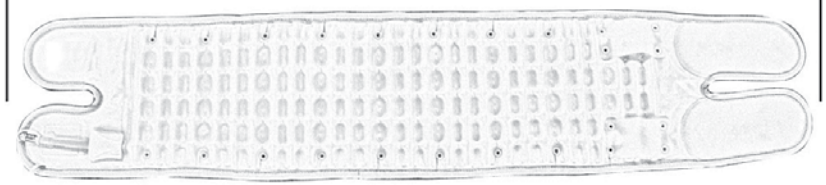

www.HIYH.info

Conception scientifique

1. La longueur moyenne de la région lombaire est de 10 cm. Cela correspond à la distance entre le pouce et l'index en extension complète. Les puissantes colonnes d'air gonflables "Body Jack" exercent une traction verticale qui permet de compenser l'impact négatif de la GRAVITÉ. La ceinture de traction ScolioEase est basée sur le phénomène de décompression mécanique (la hauteur est de 21 cm lorsqu'elle est gonflée).
2. Le procédé de fabrication breveté et la conception exclusive permettent de soulever la forme et le contour du corps humain.
3. Les colonnes d'air de la ceinture de traction ScolioEase, totalement déployées, produisent un fort effet de traction de levage sur les vertèbres lombaires.
4. Chaque ceinture est soumise à des tests de qualité garantissant la rétention de l'air et la durabilité.
5. La pompe cesse automatiquement de se mettre sous pression lorsque la pression de l'air à l'intérieur de la ceinture atteint 0,15 MPA.

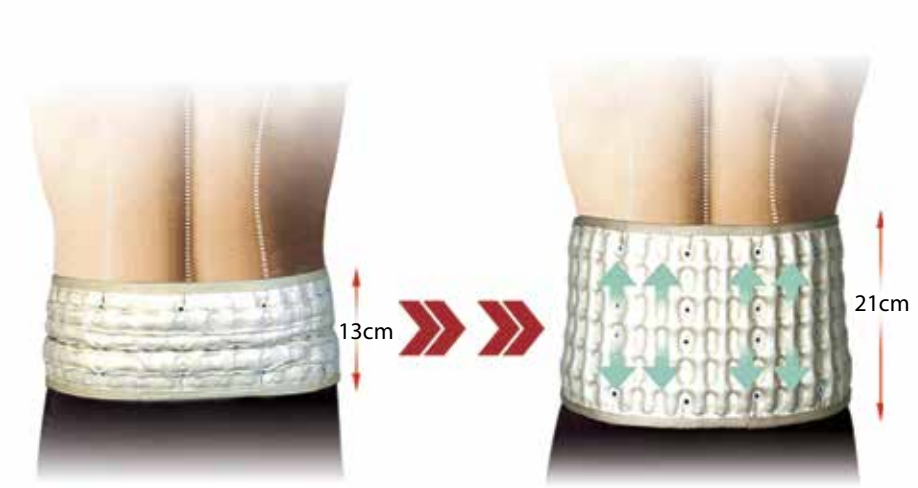

Matériel

Extérieur : PU

Matériau intérieur : Tissu de coton

Vessie d'air : TPU


Matériel utilisé pour l'extension : Velcro

Matériel pour la pompe : PA6



www.HIYH.info Ceinture de traction ScolioEase

PRENEZ VOTRE SANTE EN MAIN

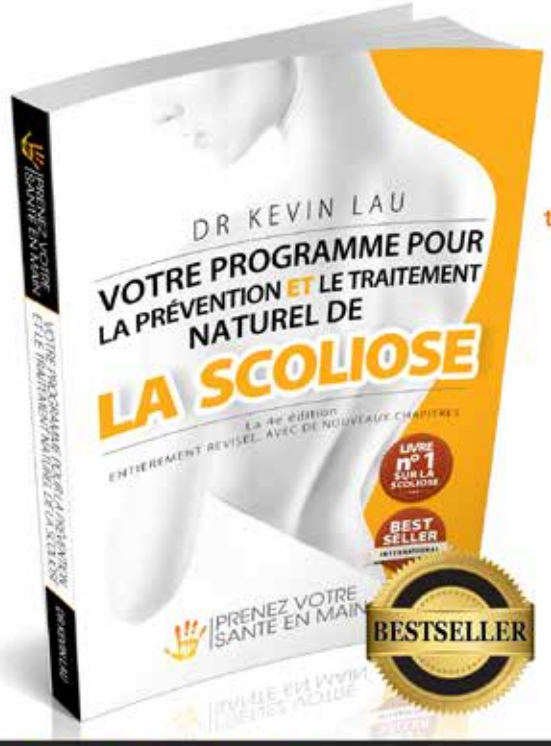

Un programme de nutrition et d'exercices completement naturel, sur et approuve pour le traitement et la prevention de la scoliose !



Dans ce livre, vous pourrez :

- Découvrir les dernières recherches réalisées sur les causes réelles de la scoliose.
- Découvrir comment le port du corset et la chirurgie se limitent à traiter les symptômes, sans s'attaquer aux causes de la scoliose.
- Discerner les traitements qui fonctionnent de ceux qui ne fonctionnent pas et apprendre pourquoi.
- Connaître les symptômes les plus courants chez les patients atteints de scoliose.
- Apprendre comment un dépistage de scoliose chez l'adolescent peut lui assurer une meilleure qualité de vie dans le futur.
- Apprendre pourquoi l'absence d'une bonne nutrition entraîne la maladie et affecte la croissance normale de la colonne vertébrale.
- Lire le seul livre publié dans le monde qui traite de la scoliose en contrôlant la façon dont les gènes liés à la scoliose s'expriment.
- Comprendre en profondeur le fonctionnement des muscles et des ligaments chez les patients atteints de scoliose.

Livre de cuisine

PRENEZ VOTRE SANTE EN MAIN



Renforcez votre colonne, un repas à la fois !

Le traitement de la scoliose demande une approche compréhensive, une qui restaurera l'alignement naturel de votre corps, en même temps qu'elle préviendra la dégénération inévitable due à l'âge.

« Votre traitement de la scoliose par la cuisine » – unique en son genre, le premier guide pour personnaliser votre régime avec plus de 100 délicieuses recettes qui renforceront votre colonne pour traiter votre scoliose ! Ce livre vous apporte les secrets surprenants, et qui ont fait leurs preuves dans le temps, de l'alimentation optimale pour la santé de la colonne sous forme d'un guide facile à suivre. Suivez simplement pas à pas les instructions pour trouver les aliments appropriés à vos métabolisme et gènes. Une fois cela accomplis, la seule chose que vous ayez à faire est de choisir la recette de votre goût et les ingrédients suivant les résultats de votre Type de métabolisme.

Vous découvrirez :

- Réduire la douleur liée à la scoliose
- Augmenter la croissance et le développement de la colonne
- Renforcer vos muscles
- Détendre les muscles
- Équilibrer vos hormones
- Améliorer votre niveau d'énergie
- Prévenir la dégénération de la colonne
- Vous aider à atteindre la taille idéale de votre corps
- Renforcer votre système immunitaire
- Améliorer votre sommeil

PRENEZ VOTRE SANTE EN MAIN

Le classeur



Surveillez vos progrès vers une pleine santé de votre colonne vertébrale !

Dans ce manuel compagnon du best-seller Amazon « Votre programme pour une prévention et un traitement naturel de la scoliose », le Docteur Lau vous offre les connaissances de bases qui vous seront nécessaires pour réussir votre programme de santé en 12 semaines.

Etape Un : Identifiez l'état de votre scoliose personnelle.

Etape Deux : Identifiez vos besoins nutritionnels unique et votre Metabolic Type

Etape Trois : Conservez votre motivation avec le programme d'exercices établi du Dr. Lau, qui inclut des tableaux d'exercices complets ainsi que des conseils de fitness.

Etape Quatre : Soyez concentré et inspiré en surveillant vos progrès jour après jour


Etape Cinq : Attendez et observez tandis que votre scoliose s'améliore, que votre douleur décroît et que votre dos se renforce

PRENEZ VOTRE SANTE EN MAIN

www.HIYH.info

Le DVD Exercices pour la prévention et le correction de la scoliose

est une sélection minutieuse des exercices que vous pouvez faire pour faire reculer la scoliose dans le confort de votre domicile.

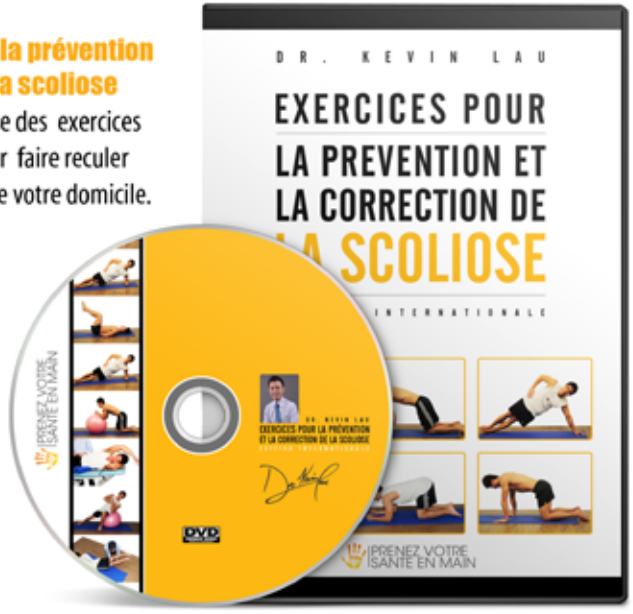

Divisé en trois sections simples à assimiler, le DVD vous fera passer par diverses étapes afin de commencer à reconstruire et à rééquilibrer votre colonne vertébrale. Les sections complètes couvrent tout, des étirements pour équilibrer votre corps à la Construction de votre centre, ainsi qu'un certain nombre de différents exercices d'alignement du corps qui ont tous été minutieusement conçus et sélectionnés par le Dr Kevin Lau.

Pour tous ceux qui souffrent de scoliose, les avantages principaux du DVD sont :

- Il offre une prolongation concise de 60 minutes du livre du Dr Lau portant le même nom, Votre programme pour une prévention et un traitement naturels de la scoliose.
- La section Equilibrer le corps du DVD explique en détail les techniques d'étirement correctes pour soulager la raideur chez les personnes atteintes de scoliose.
- La section Construire votre centre se concentre sur le renforcement musculaire qui donne de la stabilité à votre colonne vertébrale.
- Les exercices d'alignement du corps amélioreront l'alignement général de votre colonne vertébrale.
- Tous les exercices présentes sur le DVD sont adaptés pour une rééducation pré et post-opératoire en cas de scoliose.
- Sans risque, même pour ceux qui souffrent.
- Tous les exercices couverts dans Votre santé entre vos mains peuvent être pratiqués à la maison, et aucun équipement spécial n'est requis.

Le chirurgie

PRENEZ VOTRE SANTE EN MAIN



Un regard impartial en profondeur : qu'attendre avant et pendant l'opération de la scoliose

Une opération de la scoliose n'a pas besoin d'être une expérience problématique et pleine d'anxiété. En fait, avec la bonne connaissance et une information correcte, vous pouvez prendre en toute confidence et bien informé les décisions sur les meilleures options de traitement. Le dernier ouvrage de Dr. Kevin Lau vous aidera à découvrir des informations cruciales et actuelles qui vous guideront pour prendre les décisions au sujet de la santé de votre colonne vertébrale.

Vous découvrirez :

- **7 questions à vous poser –** La vérité est que, bien que la chirurgie soit appropriée pour certains patients, ce n'est pas nécessairement le cas pour tous. Considérez ces 7 simples questions pour vous aider à déterminer si la chirurgie est la meilleure option.
- **Les différents types de chirurgie de la scoliose** – Incluant comprendre les composants de la chirurgie comme pourquoi les broches posées dans votre corps pendant l'opération doivent-elle y rester.
- **Des histoires de la vie réelle –** Apprenez de plusieurs études de cas, les succès et les épreuves subies par les patients sur le chemin d'une vie normale et saine.
- **Comment évaluer** les risques associés avec les nombreux types de chirurgie de la scoliose.
- **Des astuces pratiques** – Comment vous permettre votre opération et comment choisir le meilleur moment, la place et le chirurgien.

PRENEZ VOTRE SANTE EN MAIN

La grossesse




Guide complet et facile à suivre pour contrôler votre scoliose pendant une grossesse !

« Guide essentiel sur la scoliose et une grossesse sans complications » est un guide qui aborde mois par mois tout ce que vous devez savoir pour prendre soin de votre colonne vertébrale et de votre bébé. Le livre vous soutient et vous accompagne tout au long de ce voyage merveilleux vers la naissance d'un bébé en bonne santé.

Ce livre offre des réponses et des conseils professionnels pour les femmes enceintes qui souffrent de scoliose. Vous y trouverez de nombreuses informations pour faire face aux bouleversements physiques et émotionnels vécus au cours d'une grossesse si vous êtes atteinte de scoliose. De la conception à l'accouchement et après la naissance, ce guide vous accompagnera pour devenir l'heureuse et fière maman d'un bébé en pleine santé.

Scoliotrack

PRENEZ VOTRE SANTE EN MAIN

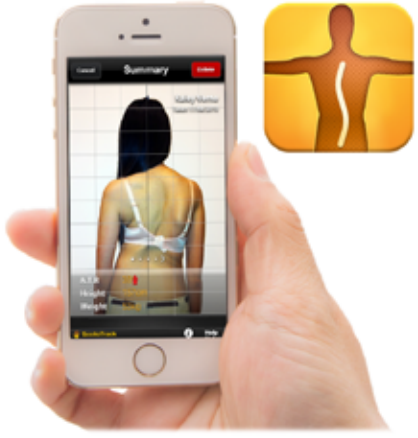

ScolioTrack est une manière sûre et innovante de suivre la scoliose d'une personne mois après mois en utilisant l'accéléromètre de l'iPhone et Android comme un médecin utiliserait un scoliomètre. Un scoliomètre est un instrument utilisé pour estimer le degré de courbure de la colonne vertébrale d'une personne. Il peut être utilisé pendant des examens de dépistage ou pour le suivi d'une scoliose, une malformation dans laquelle la colonne vertébrale se courbe de manière anormale.

Télécharger dans l'App Store

DISPONIBLE SUR Google play

Fonctionnalités de l'application :

- Il peut être utilisé par de multiples utilisateurs et il enregistre les données de manière pratique sur l'iPhone pour des examens de santé ultérieurs.
- Il suit et enregistre l'angle d'inclinaison du tronc d'une personne, une mesure clé dans le dépistage et dans la planification du traitement de la scoliose.
- Il suit la taille et le poids d'une personne – idéal pour les adolescents en pleine croissance atteints de scoliose, ou les adultes qui font attention à leur santé.
- Il affiche les flux d'information récents sur la scoliose pour maintenir les utilisateurs informés et à jour.
- Il propose une aide complète et des guides faciles à suivre afin que n'importe qui puisse suivre sa scoliose dans le confort de son domicile.

PRENEZ VOTRE SANTE EN MAIN

Le scoliomètre



Introduction d'un outil convivial pour depistage de la scoliose : une app pour scoliometre

Le scoliomètre est un outil utile et très innovant destiné aux professionnels de la santé, aux médecins et à ceux qui veulent réaliser des bilans de la scoliose chez eux. Nous pouvons toujours vous fournir un remplacement très précis pour un prix beaucoup plus abordable. Les médecins et les professionnels de la santé qui cherchent un moyen simple, rapide et élégant pour mesurer la courbure de la colonne vertébrale peuvent utiliser cet outil précis.

Télécharger dans l'App Store

DISPONIBLE SUR Google play

Suivez-nous

Restez connectés avec les tous derniers conseils, nouvelles et informations du Dr Lau sur les médias sociaux suivants. Rejoignez la page Facebook « Prenez votre santé en main » pour avoir l'opportunité de poser des questions au Dr Kevin Lau à propos du livre, la scoliose en général, l'App iPhone Scoliotrack et le DVD d'exercices.

facebook **www.facebook.com/Scoliose**

YouTube **www.youtube.com/DrKevinLau**

Instagram **https://www.instagram.com/drkevinlau/**

LinkedIn **http://sg.linkedin.com/in/DrKevinLau**

twitter **www.twitter.com/DrKevinLau**

Blogger **www.DrKevinLau.blogspot.com**

