FASCIA DI TRAZIONE
SCOLIOEASE

"Libertà da una vita di dolore per la scoliosi"

Dott. Kevin Lau
Scoliosis & Spine Correction Clinic
302 Orchard Road #10-02A
Tong Building (Rolex Centre),
Singapore 238862.
Email: support@hiyh.info



LA SALUTE
NELLE TUE MANI

Per maggiori informazioni sul DVD degli esercizi abbinato, sull'audiolibro e sull'app ScolioTrack per iPhone visita:

www.HIYH.info

FASCIA DI TRAZIONE
SCOLIOEASE

"Libertà da una vita di dolore per la scoliosi"

Siamo lieti di presentare l'ultima tecnologia per il trattamento del dolore lombare causato da patologie o lesioni spinali. La fascia di trazione ScolioEase è dotata di un esclusivo "sistema a camere d'aria" che riduce notevolmente la pressione sulle vertebre ed è estremamente efficace nell'alleviare e nel curare il dolore. La fascia di trazione ScolioEase è caratterizzata da un nuovo design complessivo, estremamente utile nei casi pre e post operatori e consente una maggiore flessibilità.



Manuale utente

Cosa c'è nella confezione?



Fascia di trazione ScolioEase



Manuale utente



Pompa per gonfiaggio

Cos'è la fascia di trazione ScolioEase

La fascia di trazione ScolioEase è un dispositivo brevettato che solleva delicatamente il busto di chi la indossa per mezzo di camere d'aria verticali. La fascia di trazione ScolioEase è leggera, sottile ed estremamente pratica da usare. Stabilizza la schiena e migliora la mobilità oltre ad alleviare il dolore e prevenire le lesioni. Può essere facilmente indossata sotto agli abiti e consente di svolgere le normali attività quotidiane come guidare, camminare e restare in piedi per periodi prolungati. Uno stile di vita attivo, con attività che richiedono mobilità come quelle sportive e del tempo libero è facilitato dall'uso della fascia di trazione ScolioEase.

Il funzionamento della fascia di trazione ScolioEase è ottimizzato posizionandola tra la parte inferiore della cassa toracica e l'estremità superiore dell'anca (cresta iliaca). La cintura produce un sollevamento mediante trazione che di conseguenza riduce la pressione nella zona lombare. Le camere d'aria verticali creano in pratica una sorta di "cric" per il corpo, che assicura la decompressione spinale. In questo modo si elimina il dolore lombare e irradiato causato dalla compressione dei nervi.

La fascia di trazione ScolioEase azzera la compressione dovuta alla forza di gravità e favorisce la riabilitazione attiva. Ciò conduce a una riduzione "naturale" del dolore perché lo spazio tra le vertebre aumenta e questo consente al disco intervertebrale di tornare nella posizione di origine.







www.HIYH.info ScolioEase Traction Belt

Indicazioni della cintura ScolioEase

L'uso della cintura è raccomandato a tutti coloro che soffrono di dolore acuto o cronico alle vertebre lombari dovuto a distorsione. Analogamente, è estremamente utile per chi è affetto da ernia del disco. Scoliosi, stenosi spinale e spondilolisi sono altre patologie che possono essere efficacemente trattate con questo dispositivo. Anche tutti i pazienti che devono sottoporsi a un intervento chirurgico per ernia del disco o che hanno già subito questo tipo di operazione possono trarre giovamento dall'impiego del dispositivo. Le donne affette da mal di schiena a seguito di una gravidanza possono utilizzarlo anche per alleviare il dolore nel periodo dell'allattamento.

Gli studenti e coloro che lavorano in ufficio, che devono rimanere seduti per lunghe ore alla scrivania spesso con cattive posture o su sedie non ergonomiche, possono utilizzare questo dispositivo per alleviare il mal di schiena. Coloro che hanno muscoli del core deboli, che tendono a causare maggiori dolori alla schiena, sono nella situazione ideale per utilizzarlo sia per alleviare il dolore che per migliorare la muscolatura del core.

Alcune occupazioni comportano l'uso dei muscoli del core, come quelle in cui si devono spesso sollevare grandi pesi o altri lavori manuali. Chi le svolge può trovare questo dispositivo estremamente utile per liberarsi dal dolore, proteggendosi al tempo stesso da ulteriori lesioni durante l'attività lavorativa. Lo stesso vale per gli sportivi che spesso sottopongono la schiena a sforzi elevati durante gli allenamenti o le competizioni, caricando la colonna vertebrale. In poche parole, chiunque, con o senza scoliosi, può trarre beneficio da un dispositivo come la fascia ScolioEase per curare il dolore lombare e i problemi ai nervi ad esso correlati.

Estremamente pratica da usare

La praticità è un altro vantaggio per i pazienti che usano la cintura ScolioEase. Può essere infatti indossata per periodi di durata diversa e con intensità di forza differente a seconda della pressione utilizzata. Questo consente un impiego della fascia ScolioEase personalizzato, su misura per le esigenze di ciascuno, nonché della situazione o delle attività che svolge.

È facile da portare ovunque e non richiede elettricità né assunzione di farmaci. A differenza dei medicinali, non ha una data di scadenza. È un investimento una volta per tutte, senza costi ulteriori nel tempo.

Una volta indossata, la sua praticità consente all'utente di svolgere le sue normali attività quotidiane e anche di eseguire esercizi fisici leggeri. Può essere facilmente celata sotto gli abiti senza rivelare la sua presenza agli altri.

Non ha effetti collaterali, secondari o complicazioni segnalati sotto il profilo degli effetti sulla colonna vertebrale. La fascia di trazione ScolioEase è così semplice da usare che i pazienti non hanno bisogno di particolari istruzioni per utilizzarla autonomamente a casa.

In questo modo la terapia è più pratica e il paziente ha la sensazione di avere un maggiore controllo sulla propria vita. Studi clinici hanno dimostrato che la fascia di trazione ScolioEase può migliorare l'ampiezza di movimento, ridurre il dolore alla schiena e prevenire la degenerazione spinale. Ho personalmente constatato ottimi risultati nei miei pazienti e spesso utilizzo la fascia di trazione ScolioEase in associazione con prescrizioni dietetiche ed esercizi.

Come funziona la cintura ScolioEase?



Posiziona la cintura sgonfia tra la costola più bassa e l'osso dell'anca. Assicurati che la cintura sia stretta e ben aderente attorno alla vita.



Gonfia completamente la cintura per mezzo della pompa inclusa. La cintura aumenterà di dimensioni verticalmente passando da 13 a 21 cm. Questo produce un effetto di trazione nella zona della colonna vertebrale interessata.

L'effetto di decompressione/trazione della fascia di trazione ScolioEase aumenta lo spazio tra le vertebre per mezzo della delicata espansione verticale delle camere d'aria.

Prima del trattamento:


Ernie o protrusioni dei dischi causano dolore alla colonna vertebrale esercitando una pressione sulle radici nervose.



Disco normale e disco erniato

Dopo il trattamento:


Usando la fascia di trazione ScolioEase come una sorta di "cric" sul corpo, l'espansione delle camere d'aria verticali conduce a un aumento dello spazio intervertebrale, con conseguente riduzione della forza di gravità e della pressione che agiscono nella zona lombare.

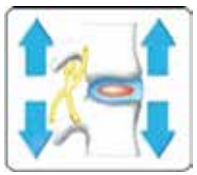



Caratteristiche della fascia ScolioEase

1. Riduzione degli effetti della forza di gravità e dei carichi compressivi per il rilassamento di spasmi muscolari, crampi, tensioni e dolori correlati alla scoliosi.
2. Contribuisce ad alleviare il dolore provocato da scoliosi, malattia degenerativa dei dischi/delle articolazioni, sciatica, spondilosi e stenosi spinale.
3. La trazione dei dischi intervertebrali conduce a una riduzione del dolore a schiena, anche, cosce, gambe e piedi causata da scoliosi o da protrusioni o ernie del disco.
4. Utile a chi deve sollevare grandi pesi, guidare o stare seduto per molte ore perché riduce il carico compressivo sulla scoliosi.
5. Favorisce il mantenimento di una postura corretta che permette una distribuzione del peso uniforme nel tratto della scoliosi lombare.
6. Può essere indossata sotto agli abiti.
7. Comoda e leggera da indossare, consente di muoversi in modo ampio e sicuro.
8. Realizzata in tessuto di cotone 100% morbido e resistente.

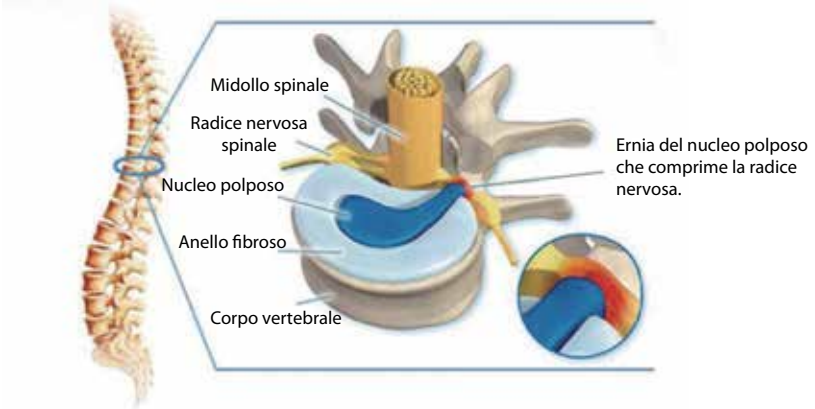

www.HIYH.info ScolioEase Traction Belt

Come si indossa



Importante

N.B.: non indossare la fascia di trazione ScolioEase mentre si mangia e per almeno 1 ora dopo i pasti. Seleziona una taglia adeguata, misurando la circonferenza della regione addominale/ombelicale per determinare con precisione la misura della cintura.

1. Misura la circonferenza addominale per determinare la taglia (vedi grafico a pag. 13).





2. Fai passare la fascia di trazione ScolioEase dietro al busto e avvolgila attorno all'area addominale. Incrocia le estremità della cintura sullo stomaco avendo cura che la valvola sia rivolta verso l'alto. Assicurati che il Velcro sia fissato più strettamente possibile. Vedi figura 2. È importante indossare la cintura in modo che sia stretta, salda e confortevole.





3. Prima di gonfiare la cintura, assicurati che la valvola sia serrata in senso orario. La pompa inclusa è dotata di un raccordo che si fissa facilmente alla valvola comprimendo il morsetto (vedi figura 4).





4. Usa la pompa fornita nel sistema della fascia di trazione ScolioEase per gonfiare lentamente la cintura. Le camere d'aria verticali si espanderanno gradualmente e l'utente comincerà a sentire un "effetto di sollevamento".

5. Rimuovi il morsetto che collega la pompa dell'aria una volta raggiunto il livello di sollevamento desiderato della zona interessata per mezzo della fascia di trazione ScolioEase.






6. Indossa la cintura per 2-3 ore alla volta, 3 volte al giorno o secondo le raccomandazioni del tuo medico.

www.HIYH.info ScolioEase Traction Belt

Avvertenze

1. La fascia di trazione ScolioEase non deve essere usata da pazienti affetti da tumori, donne incinte o bambini minori di 12 anni.

2. Le persone colpite da gravi lesioni, danni spinali, osteoporosi o che recentemente hanno subito una lesione vertebrale o soffrono di altre patologie acute o croniche NON DEVONO USARE la fascia di trazione ScolioEase senza aver prima consultato il proprio medico.

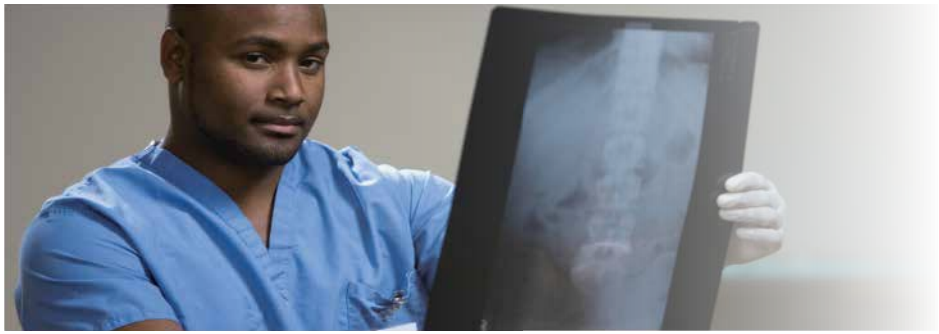

Precauzioni

1. Evita il contatto o lo sfregamento con oggetti taglienti.
2. Usa la fascia di trazione ScolioEase solo nella zona lombare.
3. Evita l'esposizione diretta al calore o al sole.
4. NON indossare la cintura mentre stai mangiando né per un'ora dopo mangiato.
5. È importante inserire esercizi per la schiena nel tuo programma di riabilitazione attiva per prevenire l'atrofia da disuso e favorire il rafforzamento della colonna vertebrale.
6. Se dovessi avvertire dolore, devi interrompere immediatamente l'uso della cintura e consultare un medico.
7. Leggi attentamente il manuale prima di usare la fascia di trazione Scolio-Ease.
8. Usa un panno leggermente umido per pulire la cintura. Asciugala con una salvietta. Falla asciugare al riparo dalla luce diretta del sole.

Raccomandazioni per il dolore lombare

1. I migliori risultati si ottengono stando in piedi.
2. Indossare continuamente per 2-3 ore, quindi togliere la cintura almeno per 2 ore e ripetere più volte ogni giorno.
3. La fascia ScolioEase può essere indossata per prevenire il dolore lombare mentre si eseguono normali attività che sottopongono a stress la zona lombare.
4. Il calore può favorire il rilassamento muscolare prima dell'uso della fascia di trazione ScolioEase. Tuttavia il ghiaccio può essere utile in caso di infiammazione acuta. Consulta il tuo medico prima di applicare ghiaccio o calore.
5. Per ottenere la massima trazione è importante posizionare la fascia di trazione ScolioEase tra due punti di ancoraggio (la cassa toracica e la cresta del bacino). La cintura può comunque essere spostata più in alto o più in basso a seconda della propria conformazione fisica.
6. Una maglietta di cotone sottile può essere facilmente indossata sotto alla fascia di trazione ScolioEase per un maggiore comfort, se non si desidera che la cintura sia a contatto con la pelle. Se dovessero manifestarsi o persistere eventuali segni di allergia, consultare un medico.

www.HIYH.info ScolioEase Traction Belt


Usi raccomandati per la scoliosi

Per i pazienti con una curva inferiore a 20 gradi che lamentano dolore o altri problemi e hanno tendenza alla progressione, come ad esempio gli adolescenti, si raccomanda una terapia della scoliosi con la fascia di trazione ScolioEase per 30 minuti 1 o 2 volte al giorno fino a quando il dolore diminuisce.

In pazienti con una curva superiore a 20 gradi e scoliosi progressiva, si raccomanda una terapia con la cintura di 1 ora, 1 o 2 volte al giorno, fino a quando il dolore diminuisce. Queste indicazioni naturalmente possono variare a seconda dell'età e della costituzione di ciascun paziente.

In pazienti con curve superiori a 40 gradi o che soffrono di dolore, il trattamento con la cintura ScolioEase deve essere iniziato immediatamente per un periodo fino a 2 ore, 2 o 3 volte al giorno.

Tieni comunque presente che, anche se i benefici della fascia di trazione ScolioEase sono stati dimostrati, è meglio cominciare piano, come con qualunque altra terapia fisica, sviluppando gradualmente la resistenza per aumentare in seguito l'intensità. Tuffarsi a capofitto nell'esercizio fisico avrà l'effetto di provocare ancora più dolore. Resisti perciò alla tentazione di esagerare con qualunque tipo di attività fisica tu possa aver scelto.

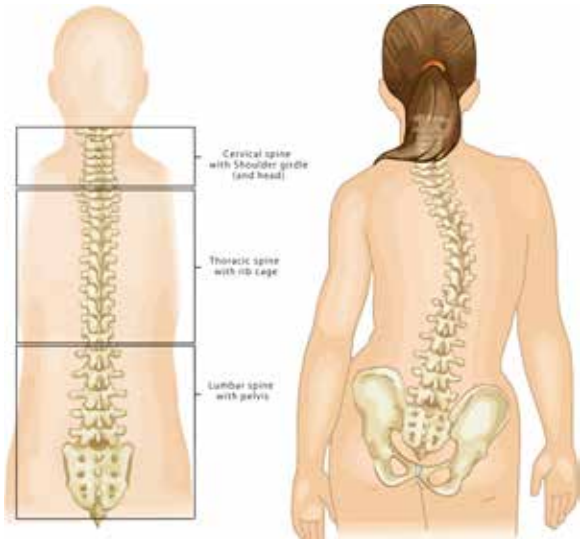




Aspetti esclusivi della fascia di trazione ScolioEase

1. Mette a disposizione di tutti la semplicità e praticità di un dispositivo di trazione lombare sicuro, facile da indossare e da usare, altamente efficace a casa, al lavoro o nel tempo libero.
2. Fornisce un miglioramento della postura e del sostegno mentre si è in piedi. La fascia di trazione ScolioEase riduce la pressione e il dolore.
3. Pratica e leggera per alleviare il dolore al lavoro, in viaggio e durante l'attività fisica.
4. Prevenzione, mantenimento e benessere ovunque e in qualsiasi momento.


Scegli la misura della fascia corretta in base alla misura del punto vita:

TAGLIA	MISURA DELLA VITA	
(S) Piccolo	28" - 36"	70cm - 90cm
(M) Medio	36" - 40"	90cm - 100cm
(L) Grande	40" - 47"	100cm - 120cm

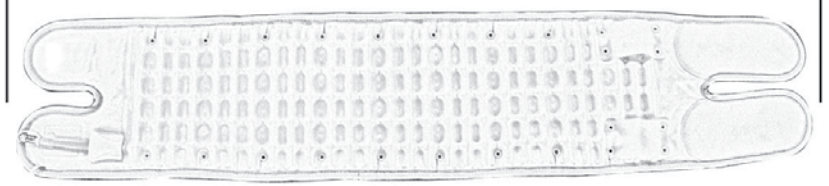

Design scientifico

1. La lunghezza media della regione lombare è di 10 cm. Questa misura equivale alla distanza tra pollice e indice completamente divaricati. Le camere d'aria verticali di questo potente "cric" per il corpo gonfiabile compensano l'effetto negativo della FORZA DI GRAVITÀ. La fascia di trazione ScolioEase si basa sul fenomeno meccanico della decompressione (quando è gonfiata il sollevamento è di 21 cm).
2. Il processo di produzione brevettato e il design esclusivo alzano la forma e la sagoma del corpo.
3. Le camere d'aria verticali della fascia di trazione ScolioEase, una volta gonfiate, producono un forte effetto di trazione che solleva le vertebre lombari.
4. Ogni cintura è sottoposta a controllo qualità per assicurare la tenuta dell'aria e la resistenza nel tempo.
5. La pompa si ferma automaticamente quando la pressione interna della cintura raggiunge 0,15 MPa.

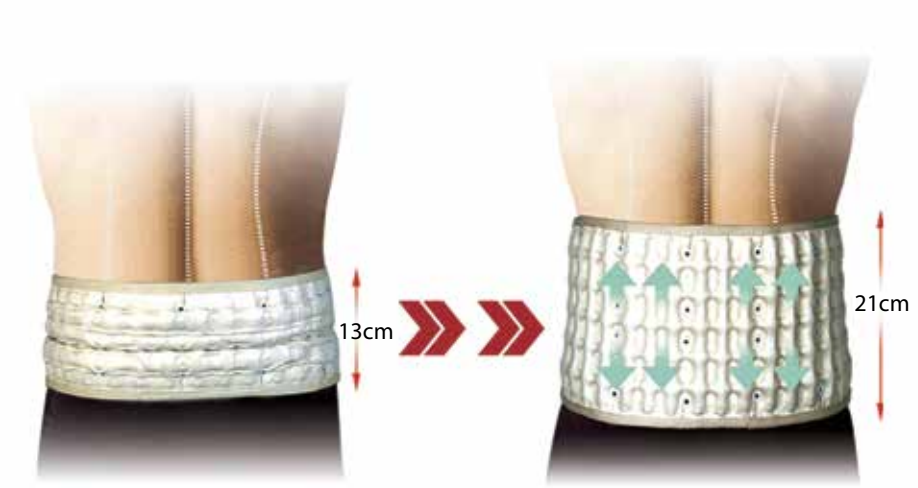

Materiale

Esterno: PU

Materiale interno: tessuto di cotone

Camera d'aria: TPU

Materiale usato per la chiusura: Velcro

Materiale della pompa: PA6



www.HIYH.info

LA SALUTE
NELLE TUE MANI



Un programma dietetico e di esercizi fisici completamente naturale, sicuro e testato per curare e prevenire la scoliosi!



Nel "Il tuo piano per la prevenzione e il trattamento naturale della scoliosi" potrai:

- Scoprire le ricerche più recenti sulle vere cause della scoliosi.
- Comprendere che i corsetti e la chirurgia curano solo i sintomi e non le cause alla base della scoliosi.
- Sapere quali sono le nuove cure che funzionano, quali non funzionano e perché.
- Conoscere i più comuni sintomi di scoliosi che presenta chi è affetto da questa patologia.
- Scoprire come una rapida valutazione della scoliosi negli adolescenti può contribuire alla qualità della vita successiva.
- Leggere l'unico libro al mondo che cura la scoliosi controllando l'espressione genica dei geni della scoliosi.
- Ottenere una comprensione approfondita del funzionamento tipico di muscoli e legamenti nei più diffusi tipi di scoliosi.
- Praticare esercizi personalizzati per la tua scoliosi adatti anche per chi ha un'agenda molto fitta.
- Sapere quali sono gli esercizi più efficaci per la scoliosi e ciò che deve essere assolutamente evitato.
- Conoscere i trucchi per modificare la tua postura e la meccanica del corpo per ridurre il dolore alla schiena della scoliosi.
- Scoprire la migliore postura per stare seduti, in piedi e sdraiati con la scoliosi.
- Imparare da altre persone affette da scoliosi attraverso il racconto delle loro esperienze e gli studi clinici.

Libro di cucina

LA SALUTE
NELLE TUE MANI



Rinforza la tua schiena, pasto dopo pasto!

Pensi di aver già provato tutte le possibilità nella tua crociata contro la scoliosi? Ormai, potresti essere passato attraverso tutta la trafila del busto, della ginnastica correttiva e persino della chirurgia. Purtroppo la curva della tua schiena potrebbe continuare a ripresentarsi, causando ancora più disagi di prima! In primo luogo, la correzione della scoliosi serve per ripristinare la curvatura della colonna vertebrale: è ora di riconsiderare la tua deformità! La cura della scoliosi richiede un approccio completo, che ripristini l'allineamento naturale del tuo corpo, prevenendo inoltre l'inevitabile degenerazione vertebrale dovuta all'età.

Ciò che puoi aspettarti mangiando le squisite ricette di questo libro:

- Riduzione del dolore legato alla scoliosi
- Migliore crescita e sviluppo vertebrale
- Rafforzamento dei muscoli
- Rilassamento della rigidità muscolare
- Miglioramento del sonno
- Riequilibrio ormonale
- Aumento dei livelli energetici
- Prevenzione della degenerazione vertebrale
- Un aiuto per raggiungere la tua taglia ideale
- Rafforzamento del sistema immunitario

LA SALUTE
NELLE TUE MANI

Diario



Il tuo compagno quotidiano per le 12 settimane per avere una colonna vertebrale più dritta e più forte!

In questo volume che accompagna e completa il best-seller di Amazon.com "Il tuo piano per la prevenzione e il trattamento naturale della scoliosi", il Dott. Kevin fornisce una guida pratica per raggiungere il successo nel corso delle 12 settimane di trattamento. Basato su ricerche e risultati clinici approfonditi del Dott. Kevin Lau, questo libro ti offre un programma di trattamento della scoliosi sicuro, non invasivo e semplice da mettere in pratica.

LA SALUTE
NELLE TUE MANI
www.HIYH.info

Il DVD degli Esercizi per la prevenzione e la correzione della scoliosi è un'attenta selezione di esercizi che puoi eseguire per far regredire la scoliosi nella comodità di casa tua.



Il DVD è suddiviso in tre sezioni facilmente comprensibili, che ti guideranno attraverso varie fasi in modo da ricostruire e riequilibrare la tua colonna vertebrale. Potrai trovarvi di tutto, dallo Stretching per l'Equilibrio Corporeo a Rinforza il Nucleo, fino a una quantità di diversi Esercizi per l'Allineamento del Corpo, tutti creati e selezionati in maniera attenta dal Dott. Kevin Lau.

Per chiunque soffra di scoliosi, i vantaggi principali del DVD sono:

- Offre una breve espansione di 60 minuti dell'omonimo libro del dottor Lau, Il tuo piano per la prevenzione e il trattamento naturale della scoliosi.
- La sezione riguardante il Bilanciamento del Corpo nel DVD spiega dettagliatamente le tecniche di stretching per alleviare le rigidità muscolari di chi è affetto da scoliosi.
- La sezione Rinforzamento del Nucleo si concentra sul rafforzamento dei muscoli che stabilizzano la tua colonna vertebrale.
- Gli Esercizi di Allineamento del Corpo miglioreranno le condizioni generali della tua colonna vertebrale.
- Tutti gli esercizi presenti nel DVD sono adatti come riabilitazione pre e postoperatoria delle patologie scoliotiche.
- Sicuro anche per chi soffre di forte dolore o ha subito un intervento per la scoliosi.
- Tutti gli esercizi contenuti nel DVD de La Salute Nelle Tue Mani possono essere svolti a casa, e non richiedono un'attrezzatura particolare.

Chirurgia

LA SALUTE
NELLE TUE MANI



Una panoramica approfondita e imparziale di ciò che ci si deve aspettare quando si affronta un intervento per la scoliosi.

Un intervento chirurgico per la scoliosi non deve essere un'esperienza spaventosa, traumatica e segnata dalla preoccupazione. In effetti, avendo a disposizione adeguate informazioni e conoscenze, puoi prendere decisioni serene e basate sui fatti sulle possibilità di trattamento migliori e maggiormente consigliabili. L'ultimo libro del dott. Kevin Lau ti aiuterà a scoprire le informazioni fondamentali più aggiornate per fare scelte consapevoli per la salute della tua colonna vertebrale.

Ti permetterà di:

- **Imparare come funziona la chirurgia spinale** – Compresa la descrizione delle varie componenti dell'intervento, come le barre permanenti inserite nel tuo corpo durante la fusione.
- **Scoprire i dati che fanno riflettere** – Per esempio, scoprirai che dopo l'intervento esiste la possibilità di non poter ritornare alla piena normalità, sotto il profilo dell'aspetto o del livello di attività.
- **Conoscere** i fattori che determinano la tua prognosi a lungo termine, illustrati anche per mezzo di casi dettagliati.
- **Capire** come valutare correttamente i rischi associati con i diversi tipi di chirurgia della scoliosi.
- **Ricevere buoni consigli** sul modo di affrontare il tuo intervento e su come scegliere il momento, il luogo e il chirurgo migliore in base alle tue necessità.

LA SALUTE
NELLE TUE MANI

Gravidanza



Una guida completa e facile da seguire per gestire la propria scoliosi in gravidanza!

La "Guida essenziale per affrontare una gravidanza sana con la scoliosi" è una guida che ti accompagna di mese in mese spiegandoti tutto ciò che hai bisogno di sapere per prenderti cura della tua colonna vertebrale e del tuo bambino. Il libro ti sostiene emotivamente, accompagnandoti in tutto lo straordinario viaggio per dare alla luce un bambino sano.

Questo libro fornisce risposte e consigli professionali alle donne in gravidanza che soffrono di scoliosi. È ricco di informazioni utili per affrontare gli sconvolgimenti fisici ed emotivi di una gravidanza, quando si è affette da scoliosi. Dal concepimento alla nascita e oltre, questa guida ti prenderà per mano e ti accompagnerà fino a diventare la madre felice e orgogliosa di un neonato in salute.

Scoliotrack

LA SALUTE NELLE TUE MANI



ScolioTrack è un modo sicuro e innovativo per monitorare la propria scoliosi mese per mese. Il dispositivo permette all'utente di registrare l'evoluzione delle curve vertebrali anomale che caratterizzano la scoliosi. Con un semplice tocco dell'iPhone, l'utente può monitorare facilmente la propria situazione mese dopo mese. Questo programma di semplice utilizzo è adatto per le persone affette da scoliosi di ogni età. Grazie al suo elevato livello di precisione, questa applicazione è adatta per i professionisti, quali medici, chiropratici o fisioterapisti; al tempo stesso, però, è sufficientemente semplice per essere utilizzata a casa per uso personale.

Scarica su App Store


DISPONIBILE SU Google play

Caratteristiche dell'applicazione

- Registra e salva l'angolo di rotazione del tronco (ATR) del paziente, una misura essenziale per lo screening e la pianificazione del trattamento della scoliosi.
- Registra il peso e la statura del paziente: perfetta per adolescenti in crescita affetti da scoliosi o per adulti attenti alla propria salute.
- I dati della scoliosi vengono visualizzati graficamente, evidenziando mese per mese le variazioni della patologia.
- La funzione della fotocamera scatta una foto della schiena del paziente per individuare eventuali cambiamenti visibili, quali gibbi costali, protrusione delle anche, allineamento del corpo o deviazione spinale, nonché per confrontarla facilmente con immagini archiviate in precedenza.
- Può essere usato da più utenti permettendo il salvataggio dei dati per monitoraggi futuri.
- Possiede una guida completa e facile da seguire in modo da registrare e monitorare la scoliosi nella comodità di casa tua.

LA SALUTE NELLE TUE MANI

Scoliometro

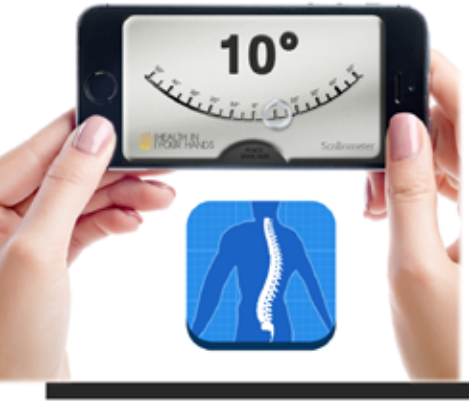

Un pratico strumento per lo screening della scoliosi: l'app scoliometro

L'app Scoliometro è un utile e innovativo strumento rivolto a medici, specialisti e a coloro che desiderano eseguire controlli della scoliosi a casa. Possiamo offrirti un'alternativa sempre disponibile ed estremamente accurata, a un prezzo molto più accessibile. I medici e i terapisti che desiderano un modo semplice, veloce ed elegante di misurare la curvatura della colonna vertebrale possono usare questo strumento accurato. Gli specialisti utilizzano da molti anni lo scoliometro come efficace mezzo di screening della scoliosi e, adesso, puoi averne uno anche tu, sempre a portata di mano sul tuo smartphone.

Seguici

Rimani connesso con le ultime notizie, aggiornamenti e consigli per la salute del dott. Kevin Lau grazie ai Social Network. Iscriviti alla pagina di Facebook di Health In Your Hands, per avere l'opportunità di chiedere al dott. Kevin Lau informazioni sul libro, questioni generali sulla tua scoliosi, sull'applicazione per iPhone chiamata ScolioTrack o sul DVD degli esercizi:

facebook www.facebook.com/Scoliosi.it

YouTube www.youtube.com/DrKevinLau

Instagram www.instagram.com/drkevinlau

LinkedIn www.linkedin.com/in/drkevinlau/it

twitter www.twitter.com/DrKevinLau

Blogger www.DrKevinLau.blogspot.com

